





Cânula de Veress de uso único Bhio Supply

A cânula Veress de uso único Bhio Supply é usada para criar o pneumoperitônio em procedimentos laparoscópicos.

Seu projeto combina um estilete rombo com mola retrátil e uma cânula de ponta afiada garantindo acesso seguro e eficiente à cavidade abdominal.

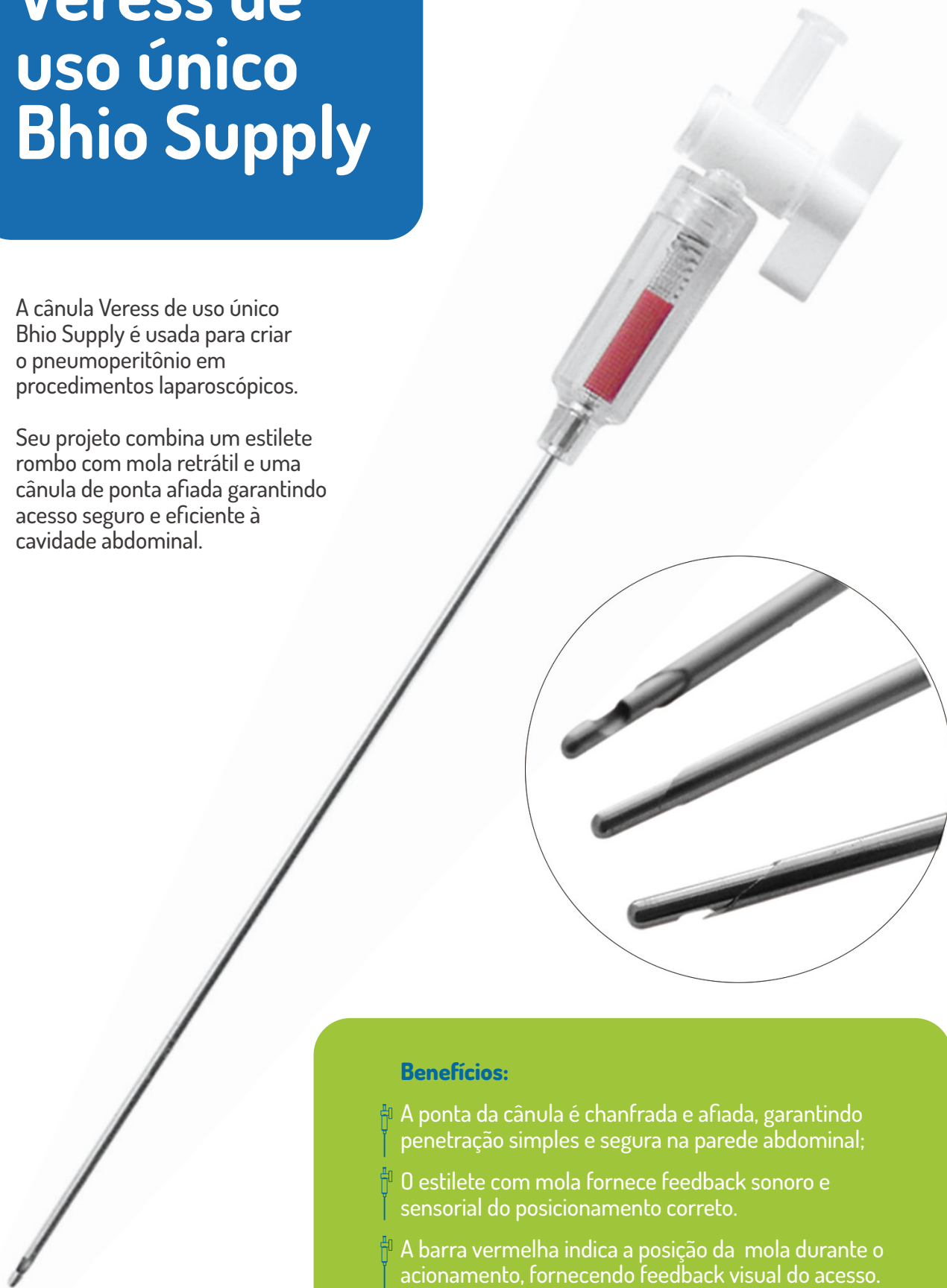

Benefícios:

-  A ponta da cânula é chanfrada e afiada, garantindo penetração simples e segura na parede abdominal;
-  O estilete com mola fornece feedback sonoro e sensorial do posicionamento correto.
-  A barra vermelha indica a posição da mola durante o acionamento, fornecendo feedback visual do acesso.

Composição:

As cânulas de Veress de uso único Bhio Supply são produzidas em Policarbonato, Polietileno, ABS, Silicone Grau Médico e Aço Inox 304. Latex Free.

Dimensões:

As cânulas de Veress Bhio Supply estão disponíveis em dois comprimentos:

ØMAC24F0 – cânula de 120mm, Ø 2,1mm

ØMAC24G0 – cânula de 150mm, Ø 2,1mm

Apresentação:

Produto fornecido estéril (Óxido de etileno - ETO)
Validade: 3 Anos



Uso único,
não reprocessar



**Cânula de Veress de
uso único Bhio Supply**

Registro ANVISA Nº: 80381219013


**bhio
supply**

Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 85
São Paulo SP
Brasil 05319-000

bhiosupply.com.br
 @bhiosupply

V02/NOV24