

Instrumentais BhioP&P®

Bhio Supply

Plug & Play
Instruments



BAIXE ESTE FOLDER
DOWNLOAD THIS BROCHURE

bhiosupply




Sempre em busca de inovação e qualidade, a Bhio Supply criou uma nova linha de instrumentais para videocirurgia, agora contando com engate rápido, com apenas três partes e simples montagem e desmontagem dos componentes. Conheça a solução que trará ainda mais praticidade para os procedimentos de videocirurgia.

Always looking for innovation and quality, Bhio Supply developed a new line of laparoscopic surgery instruments, now featuring a quick coupling, with only three parts of simple assembly-disassembly of the components. This solution bring more convenience for the laparoscopic procedures.



Formador de Código Code Generator

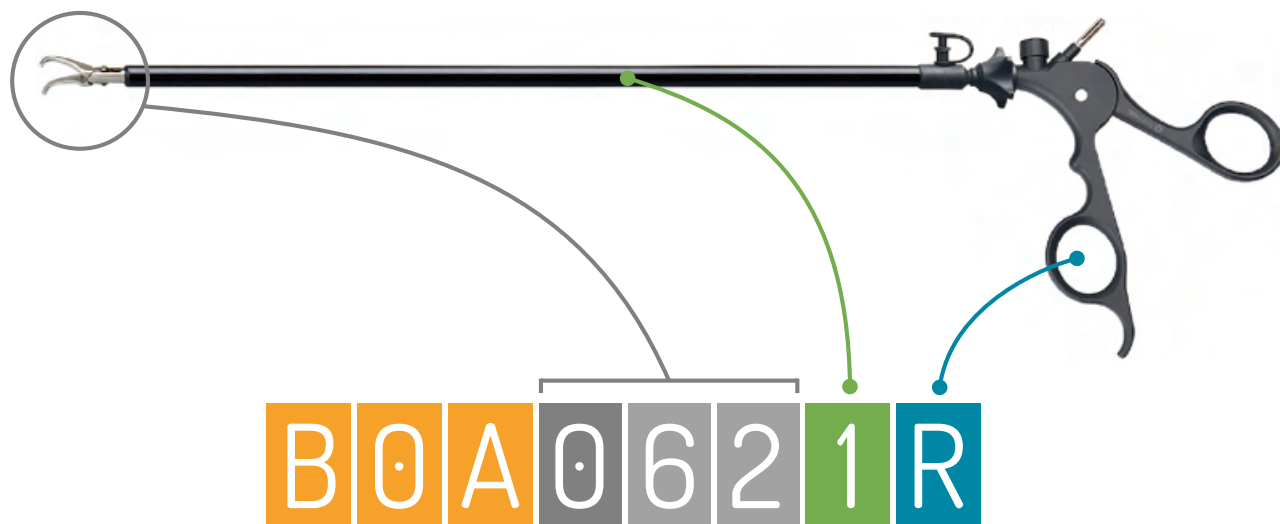

Estrutura do Produto Product Structure



- 1 - Empunhadura
Handle
- 2 - Refil
Refil
- 3 - Parte Ativa
Active Part
- 4 - Tubo
Tube
- 5 - Botão para desengate
seguro
Secure Release Button

Tesouras Monopulares 36cm 36cm Monopolar Scissors



Sem Cremalheira
Without Ratchet

	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂMETRO (MM) DIAMETER	COMPRIMENTO (CM) LENGTH	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE
	Tesoura Tipo Metzembbaum Curva Serrilhada Metzembbaum Type Scissors - Serrated Curve	5	36	BSA11620	B0A0621R
	Tesoura Tipo Metzembbaum Curva Metzembbaum Type Scissors - Curved	5	36	BSA01010	B0A0011R
	Tesoura Tipo Metzembbaum Reta Metzembbaum Type Scissors - Straight	5	36	BSA01000	B0A0001R

Tesouras Monopulares 42cm 42cm Monopolar Scissors



Sem Cremalheira
Without Ratchet



	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂMETRO (MM) DIAMETER	COMPRIMENTO (CM) LENGTH	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE
	Tesoura Tipo Metzembbaum Curva Metzembbaum Type Scissors - Curved	5	42	BSA02010	B0A0012R
	Tesoura Tipo Metzembbaum Reta Metzembbaum Type Scissors - Straight	5	42	BSA02000	B0A0002R

Pinças de Apreensão Monopolares (5mm) Monopolar Grasping Clamps (5mm)



Sem
Cremalheira
Without Ratchet

Com
Cremalheira
With Ratchet

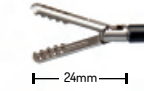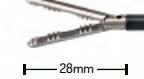	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂM. (MM) DIAMETER	COMPR. (CM) LENGTH	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
 37mm	Pinça Tipo Fenestrada Fenestrated Type Clamp	5	36	BSA31350	B0A3351R	B0A3351Q
 14mm	Tipo Apreensão 2x4 Dentes Dupla Ação Grasping Type Clamp 2x4 Double Action Teeth	5	36	BSA41270	B0A4271R	B0A4271Q
 18mm	Pinça Tipo Apreensão Extração Grasping-Extraction Type Clamp	5	36	BSA41310	B0A4311R	B0A4311Q
 24mm	Pinça Tipo Apreensão Especial Para Vesícula Special Grasping Type Clamp for Gallbladder	5	36	BSA41420	B0A4421R	B0A4421Q
 27mm	Pinça Tipo Apreensão Atraumática Curva Fenestrada Atraumatic Grasping Type Clamp Fenestrated Curve	5	36	BSA41AB0	B0A4AB1R	B0A4AB1Q
 18mm	Pinça Tipo Apreensão Reforçada Fenestrada Reinforced Grasping Type Clamp Fenestrated	5	36	BSA41AN0	B0A4AN1R	B0A4AN1Q
 28mm	Pinça Tipo Apreensão Atraumática Serrilha Intercalada Atraumatic Grasping Type Clamp Interspersed Serration	5	36	BSA41C50	B0A4C51R	B0A4C51Q
 19mm	Pinça Tipo Vancaillie Adesão Vancailie Type Clamp Accession	5	36	BSA41C90	B0A4C91R	B0A4C91Q

Pinças de Apreensão Monopolares (5mm) Monopolar Grasping Clamps (5mm)



Sem Cremalheira
Without Ratchet

Com Cremalheira
With Ratchet

	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂM. (MM) DIAMETER	COMPR. (CM) LENGHT	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
 18mm	Pinça Tipo Babcock Babcock Type Clamp	5	36	BSA31340	B0A3341R	B0A3341Q
 26mm	Pinça Tipo Simples Ação Fenestrada Simple Action Type Clamp Fenestrated	5	36	BSA31B50	B0A3B51R	B0A3B51Q
 31mm	Pinça Tipo Debakey Curva Debakey Type Clamp Curved	5	36	BSA41CE0	B0A4CE1R	B0A4CE1Q

Pinças de Apreensão Monopolares (10mm) Monopolar Grasping Clamps (10mm)



Sem Cremalheira
Without Ratchet

Com Cremalheira
With Ratchet

	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂM. (MM) DIAMETER	COMPR. (CM) LENGHT	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
 35mm	Pinça Tipo Denteada em Garra 2x3 Dentes Simples Ação Claw Type Clamp 2x3 Simple Action Teeth	10	36	BSA38260	B0A3268R	B0A3268Q
 21mm	Pinça Tipo Denteada em Garra 2x3 Dentes Curta Simples Ação Claw Type Clamp 2x3 Short Simple Action Teeth	10	36	BSA38C30	B0A3C38R	B0A3C38Q
 34mm	Pinça Tipo Denteada em Garra 2x3 Dentes Dupla Ação Claw Type Clamp 2x3 Double Action Teeth	10	36	BSA38C40	B0A3C48R	B0A3C48Q
 32mm	Pinça Tipo Biópsia Concha Biopsy Type Clamp Conch	10	36	BSA11620	B0A3CF8R	B0A3CF8Q
 34mm	Pinça Tipo Babcock Babcock Type Clamp	10	36	BSA38330	B0A3338R	B0A3338Q


Pinças de Dissecção (5mm) Dissecting Clamps (5mm)



	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂM. (MM) DIAMETER	COMPR. (CM) LENGHT	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
 22mm	Pinça Tipo Dissecção Maryland Longa Maryland Dissecting Type Clamp Long	5	36	BSA51380	B0A5381R	B0A5381Q
 16mm	Pinça Tipo Dissecção Kelly Serrilha Cruzada Kelly Dissecting Type Clamp Cross Serration	5	36	BSA51730	B0A5731R	B0A5731Q
 16mm	Pinça Tipo Dissecção Mixer 90° Mixer Dissecting Type Clamp 90°	5	36	BSA51790	B0A5791R	B0A5791Q
 23mm	Pinça Tipo Dissecção e Apreensão Atramumática Dissecting and Grasping Type Clamp Atraumatic	5	36	BSA31370	B0A5371R	B0A5371Q
 43mm	Pinça Tipo Dissecção e Apreensão Atraumática Curva Dissecting and Grasping Type Clamp Atraumatic, Curved	5	36	BSA31C00	B0A3C01R	B0A3C01Q

Pinças de Dissecção (10mm) Dissecting Clamps (10mm)

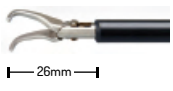

	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂM. (MM) DIAMETER	COMPR. (CM) LENGHT	REFIL REFIL	CÓDIGO CODE	CÓDIGO CODE
 26mm	Pinça Tipo Dissecção e Apreensão Mixer 90° Longa Mixer Dissecting Type Clamp 90° Long	10	36	BSA58C10	B0A5C18R	B0A5C18Q

Modelos de Empunhaduras Handhold Models

Empunhadura sem cremalheira

Handhold without
ratchet

CÓDIGO
CODE

BSAERAA0



Empunhadura com cremalheira

Handhold with
ratchet

CÓDIGO
CODE

BSAEQAA0



Modelos de Tubo de Engate Rápido Quick Coupling Tube Models



DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DIÂMETRO (MM) DIAMETER	COMPRIMENTO (CM) LENGTH	CÓDIGO CODE
Instrumental Endoscópico com haste isolada, monopolar e de engate rápido. Endoscopic Instrument with isolated steam, monopolar and quick hitch	5	36	BSA34AA0
	5	42	BSA35AA0
	10	36	BSA54AA0

Instruções para Desmontagem Disassembly Instructions




Aperte o botão
Push the button



Desengate o tubo
Disengage the tube




Solte o tubo
Release the tube

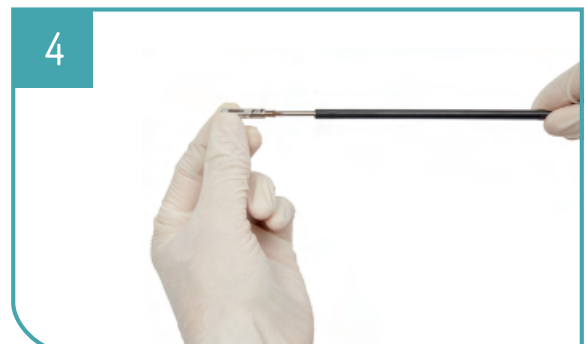


Gire 1/4 de volta para soltar a o refil
Turnback 1/4 to release the refill



Instruções para Montagem Assembly Instructions

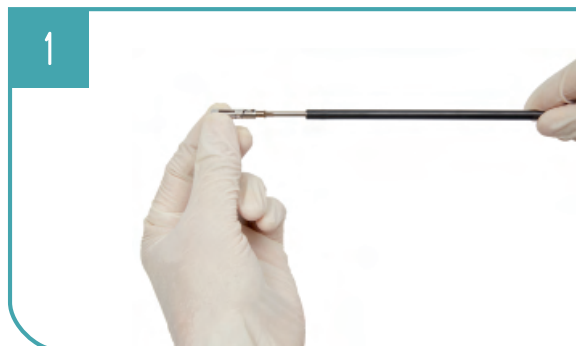

Encaixe o refil no tubo
Fit the refill into the tube

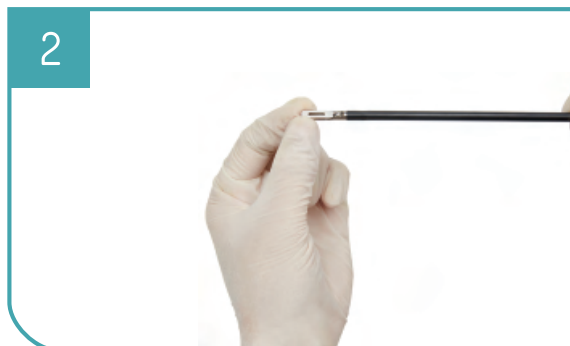

Gire 1/4 de volta para prender o refil
Turn forward 1/4 to lock the refill



Engate o tubo na empunhadura aberta
Engage the tube into the open handle




Verifique o encaixe.
A empunhadura deve ficar aberta
Check the fitting. The handle must be open





bhiopdi Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação
Research, Development and Innovation

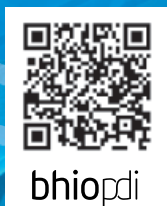



BhioP&P[®]

Instrumentais Plug & Play

Registro Anvisa 80381210115

